


# **DNT-D** **saldatrice manuale** **per fare e chiudere buste da sterilizzazione**

---

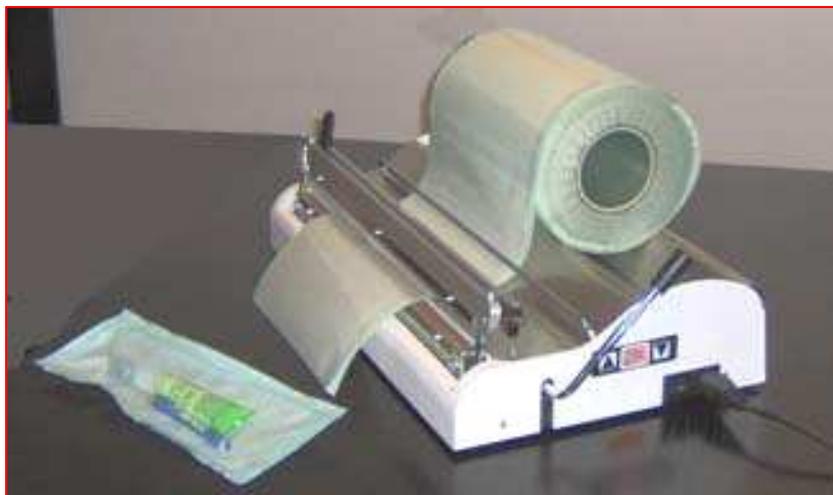

La saldatrice manuale DNT può essere utilizzata per fare sacchetti partendo da bobine di materiale tubolare per sterilizzazione, con o senza soffietti laterali, con larghezza massima cm 25 o 45 cm a seconda della versione (qualsiasi lunghezza) e per chiudere le buste dopo che sono state riempite.

La saldatrice esegue una saldatura a piattina larga 8 mm in ottemperanza alle direttive sulla sterilizzazione. Il tempo di saldatura è regolabile per mezzo di un temporizzatore con display digitale. Per avviare la saldatura è sufficiente abbassare la leva laterale. Un segnale sonoro indica il tempo di saldatura.

Quando viene fatto il sacchetto partendo dalla bobina tubolare, durante la saldatura si fa scorrere il coltello di taglio posto sulla ganascia superiore.

In fase di chiusura di sacchetto già riempito è sufficiente eseguire la saldatura; oppure si può eseguire anche il taglio, per rifilare eventuali parti eccedenti del sacchetto.

Su richiesta può essere fornito un bancalino d'appoggio per le buste.

<b>dati tecnici</b>	<b>DNT-D 25</b>	<b>DNT-D45</b>
larghezza utile:	25 cm	45 cm
saldatura:	a piattina larga 8 mm	
materiali saldabili:	carta + plastica da sterilizzazione	
ingombro:	42 x 30 x 22 cm	57 x 30 x 22 cm
peso:	8 kg	10,5 kg
alimentazione:	230 V monofase	
consumo:	850 W solo durante la saldatura	

Cibra si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai modelli di serie.

---